

STOKKE

Varenummer: 137020 HMI nr: 89903

Tilsigtet anvendelse: Støttestokken er kun beregnet til at blive brugt som ganghjælpemiddel til bevægelseshæmmede personer.

Sikkerhedsanvisninger:

- Produktet bør ikke anvendes på nogen anden måde end beregnet.
- Kontakt en sundhedspersonale, før du bruger en stok.
- Produktet skal justeres af kompetent personale (f.eks. fysioterapeut eller andet ordinerende personale) for at tilpasse det til hver enkelt brugers specifikke behov.
- Stokken må aldrig bruges til f.eks. at stoppe en elevatordør eller lignende.
- Dupskoen skal kontrolleres regelmæssigt. Beskadigede eller slidte dupsko, kan betyde en forringelse af grebet på gangunderlaget.
- Beskadigede eller slidte dupsko skal udskiftes med nye, som kan bestilles hos Danish CARE Supply.
- Hvis genstande (f.eks. papir, snavs osv.) fanges under dupskoen, skal de straks fjernes, da grebet kan forringes.
- I tilfælde af glatte overflader skal dupskoen suppleres med ispigge, og der skal udvises stor omhu.
- I tilfælde af tegn på, at højdejusteringen er løs, eller at produktet på anden måde er slidt, skal produktet tages ud af brug.

Tekniske specifikationer

Højde: 98 cm

Vægt: 0,290 kg

Materiale: Aluminiumsrør, PP (håndtag), naturgummi (dupsko)

Forklaring af symbolerne på produktet og i brugsanvisningen.



Kan vaskes med alkalisk sæbeopløsning, pH 5-9.



Vaskes i max 85°C i max 30 min.



Visuel kontrol.



Produkten følger (EU) MDR 2017/745 og 2007/47/EG for medicintekniske produkter.




Fremstillet af :
Swereco AB Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda Tel: +46 (0)8
5000 5240 www.swereco.com
info@swereco.com

Brugsanvisning

Anvendelse:

1. Juster højden på støttepinden ved at skære af stokken. Højden på stokken skal tilpasses den enkelte bruger
2. Kontroller dyppeskoene før brug. Beskadigede eller slidte dyppesko skal udskiftes med nye

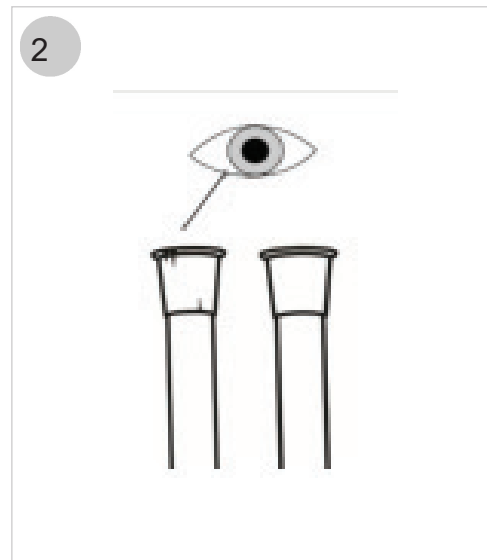

Rengøring og vedligeholdelse: Rengøres jævnligt om nødvendigt (min. 1x/måned) med sæbeopløsning, ph 5-9. Ved skift af bruger skal produktet desinficeres, autoklaveres ved maks. 85° i maks. 3 minutter. Tør alternativt med 70% isopropanol.

Reservedele:

Varenr.: 137011, Dupsko 21-23 mm (HMI 85024)

Tilbehør:

Varenr. 401345, Ispig til stok
Varenr. 240000, HangOn strop til stok
Varenr. 500114, Stokke bånd

Genbrug: Når produktet er brugt op, genanvendes det som metalkrot og plastaffald. Emballagen består af bølgepap og genbruges derefter

Brugervægt: Der er ikke krav om brugervægte til støttestokke. Stokkene er dog testet i produktionen til en brugervægt på 100 kg.



Alvorlige hændelser, der opstår under brug, skal rapporteres til Danish CARE Supply