






Let's Get Up

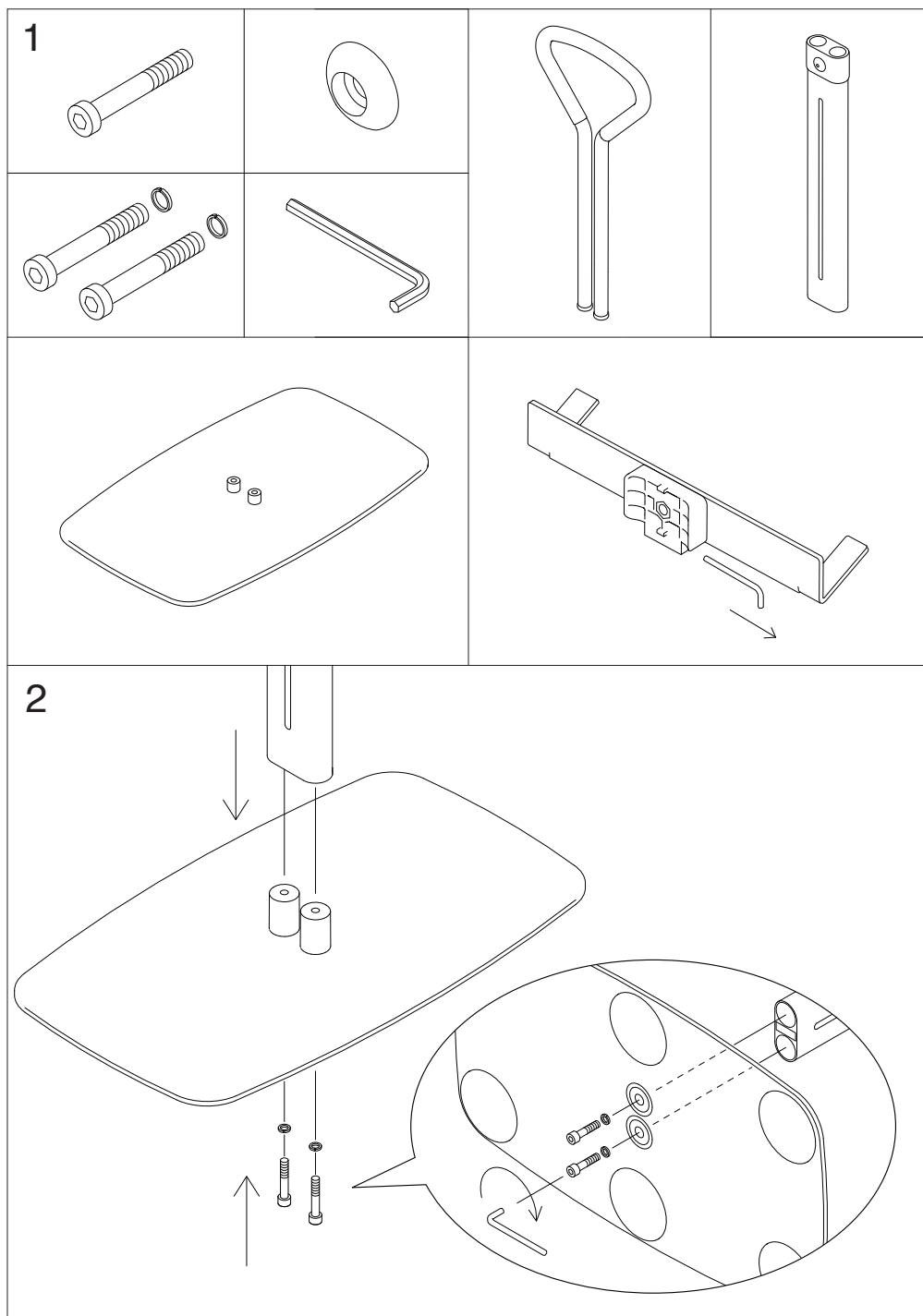

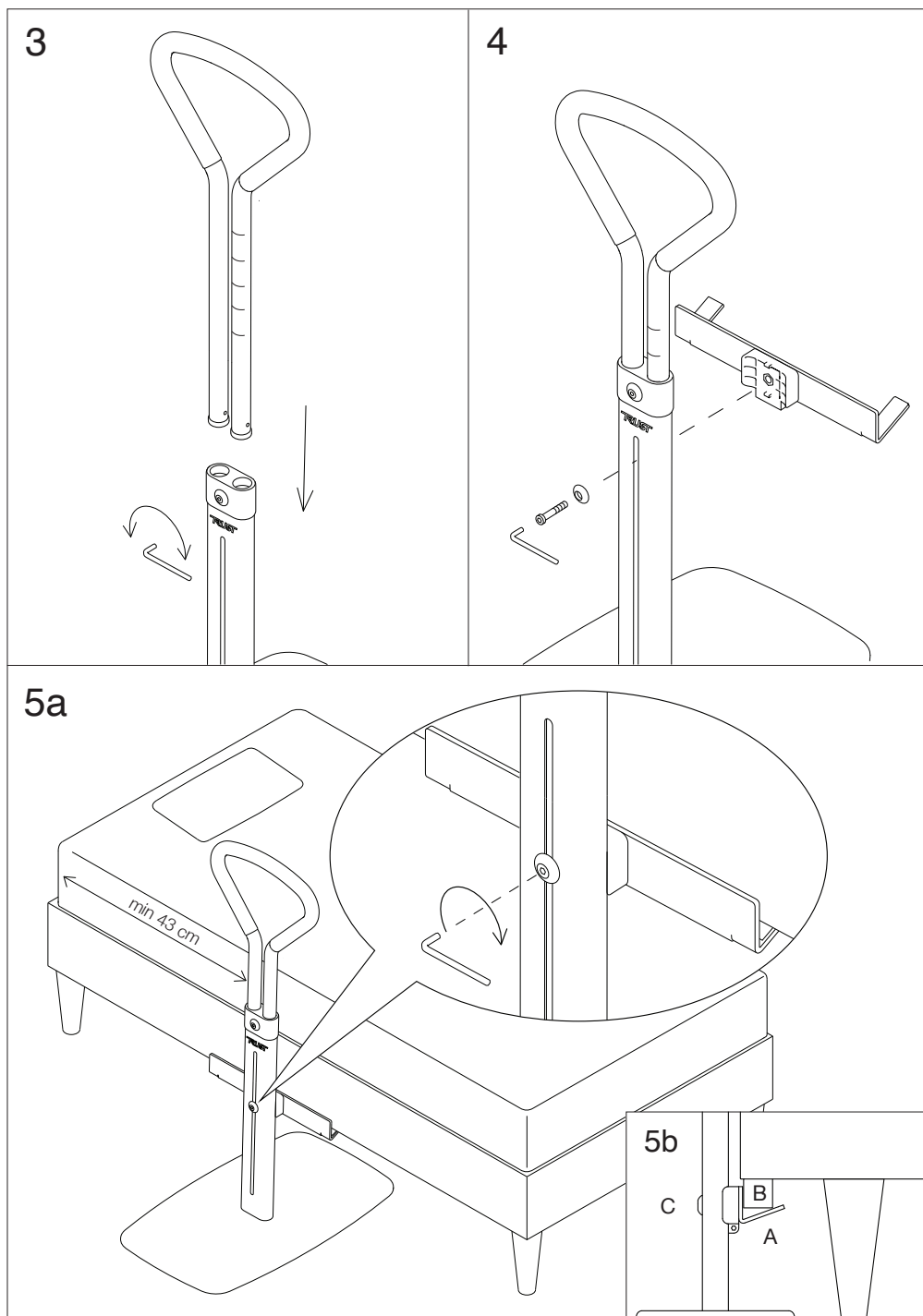

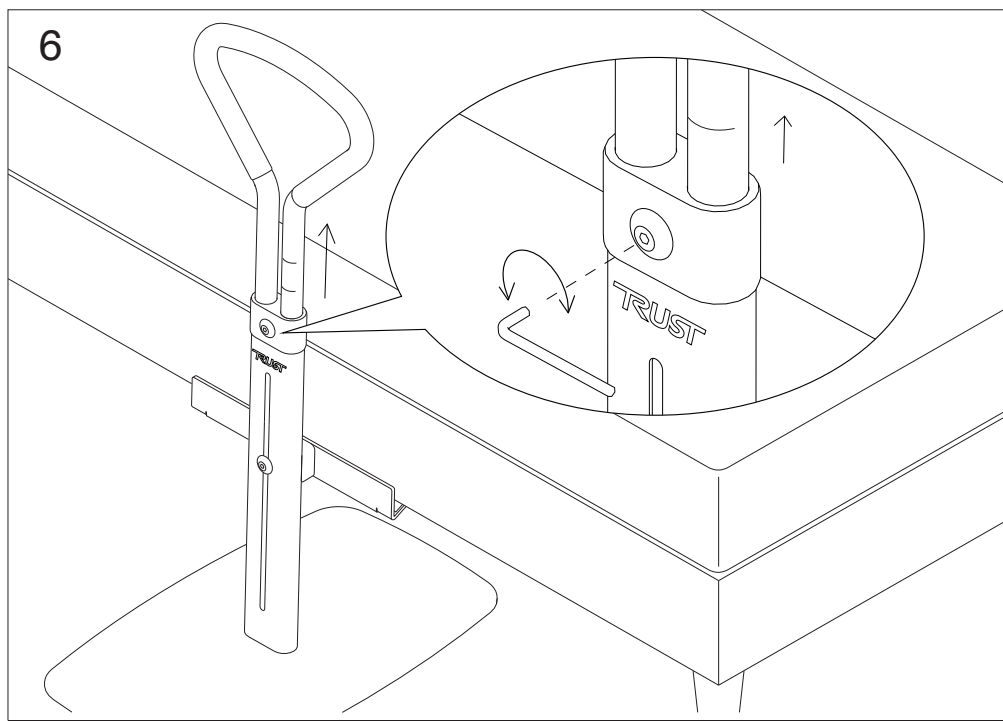

Let's Get Up - Oprejsningsstøtte

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om oprejsningsstøtten Let's Get Up. Læs vejledningen grundigt før brug, og opbevar den til fremtidig brug.

Tiltænkt anvendelse: Let's Get Up er tiltænkt til at hjælpe brugere med at komme op af og ned i sengen og kan anvendes både i hjemmet og i plejemiljøer. Produktet må kun anvendes på senge med en stabil sengeramme, hvor madrassen ikke kolliderer ved kanten under belastning.

Produktet må ikke anvendes på anden måde end den tilsigtede. Trust Care påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes, ændres eller monteres på anden måde end angivet i denne brugervejledning. Kontrollér regelmæssigt produktets stabilitet og styrke, og at skruerne er spændt korrekt!

Målgruppe: Produktet er beregnet til voksne brugere, som har tilstrækkelig fysisk styrke, balance og kognitiv evne til at forstå sikker anvendelse.

Kontraindikationer: Produktet må ikke anvendes på senge med en blød eller ustabil madraskant, hvor madrassen synker betydeligt sammen under belastning, eller på senge uden fast ramme.

Produktet er ikke egnet til personer, som:

- mangler tilstrækkelig muskelstyrke i armene eller har væsentlige balanceproblemer
- har kognitive funktionsnedsættelser, som påvirker sikker anvendelse
- ikke kan følge instruktioner

Rapportering af hændelser: Hændelser eller mistanke om funktionsfejl skal straks rapporteres til fabrikanten Trust Care AB. Alvorlige hændelser skal desuden rapporteres til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren befinder sig.

Montering: Oprejsningsstøtten er udstyret med et justerbart sengebeslag og må kun installeres på compatible senge med stabil ramme.

1. Pak alle dele ud. Unbrakonøglen til montering og justering opbevares i sengebeslaget.

2. Fastgør stolpen til bundpladen med de to skruer nedefra. Stram godt til med unbrakonøglen.

3. Løsn skruen øverst på stolpen en smule ved at dreje den mod venstre. Indsæt håndtaget. Fastgør derefter håndtaget ved at dreje skruen mod højre.

4. Montér sengebeslaget på stolpen.

5a. Placer støtten tæt op ad sengen. Produktet skal monteres centralt langs sengens langside. Afstanden mellem sengens hovedende og Let's Get Up skal være mindst 43 cm for at minimere risikoen for fastklemning.

5b. Fastgør sengebeslaget under sengen. Sørg for, at beslagene (A) ligger tæt mod sengerammen (B). Stram skruen (C), og kontrollér, at den sidder forsvarligt fast.

6. Justér håndtagets højde ved at løsne skruen en smule. Indstil håndtaget til den ønskede højde ved hjælp af markeringerne på håndtagsrøret. Stram skruen igen, og sørg for, at metalpladen på bagsiden falder på plads og låser fast i hullerne.

Kontrollér, at sengebeslaget er korrekt monteret før brug, og at låseskruerne til både beslag og håndtag er spændt korrekt.

Kontrollér, at oprejsningsstøtten står tæt mod seng og madras. Hvis der opstår et mellemrum, er der risiko for klemskader.

Vedligeholdelse: Regelmæssige sikkerhedskontroller sikrer sikker funktion og problemfri anvendelse.

Kontrollér, at ingen dele er beskadigede. Reparationer må kun udføres af kvalificeret personale. Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør fra Trust Care.

Fjern ikke komponenter fra produktet, og anvend ikke tilbehør, som ikke er godkendt af fabrikanten, da produktets sikre funktion ellers ikke kan garanteres.

Produktet må ikke anvendes i særligt varme eller fugtige omgivelser. Det skal opbevares tørt ved stuetemperatur. Af hygiejniske årsager anbefales regelmæssig rengøring. Rengøring kan udføres med varmt vand og om nødvendigt sæbevand med pH-værdi på 5-9 eller almindeligt tilgængelige rengøringsmidler. Om nødvendigt kan der anvendes overfladedesinfektion, f.eks. isopropanol 70 %.

Gendannelsesinstruktioner: Ved gendannelse skal produktet kontrolleres, og slidte eller beskadigede dele skal udskiftes. Ældre skruer med fremspringende skruenhoveder skal erstattes med nye. Produktet kan desinficeres i egnet udstyr ved en maksimal temperatur på 85 °C i højst 3 minutter.

Genbrug: Produktet skal adskilles og sorteres efter materiale. Aluminiums- og ståldele afleveres som metalkrot. Plastdele sorteres som plast eller brændbart affald i henhold til lokale regler. Afleveres på genbrugsstation.

Garanti: Vi tilbyder 2 års garanti. Garantien omfatter ikke slid på dele som antiglidegummiet på rammebeslaget, under bundpladen samt gummibelægningen på håndtaget.

Sikkerhedsanvisninger



Korrekt montering

Kontrollér efter montering, at oprejsningsstøtten står tæt op ad seng og madras uden mellemrum, og at sengebeslagene sidder tæt mod sengerammen, samt at skruerne er spændt forsvarligt. Se figur 5a og 5b i manualen.



Risiko for klemning

Hvis produktet ikke monteres i overensstemmelse med denne vejledning, kan der opstå risiko for klemning, hvis der dannes et mellemrum mellem sengen og oprejsningsstøtten. Hænder og fingre må kun placeres på det skumbeklædte håndtag. Produktet indeholder åbninger, hvor fingre kan komme i klemme, hvis de placeres forkert.



Kontrollér eventuelle mellemrum

Hvis der opstår et mellemrum mellem sengen og oprejsningsstøtten, øges risikoen for klemkader i takt med mellemrummets størrelse. Afstanden mellem madrassen og oprejsningsstøtten skal være mindre end 4 cm under belastning, når brugeren sidder på sengekanten. Kontrollen skal udføres ved installation og derefter regelmæssigt.



Korrekt anvendelse

Produktet er ikke beregnet til at bære brugerens fulde kropsvægt, men må kun anvendes som støtte ved oprejsning. Produktet er testet til en maksimal brugervægt på 150 kg.



Risikovurdering af brugeren

Før oprejsningsstøtten installeres, skal der foretages en vurdering af brugerens fysiske og kognitive forudsætninger. Risikovurderingen skal udføres af sundhedspersonale eller en anden person med tilstrækkelig viden om brugerens behov og sikker anvendelse af produktet. Begrænsninger i kognition, balance eller muskeltonus kan påvirke anvendelsen og udgøre en sikkerhedsrisiko. Produktet må kun anvendes af personer, der kan forstå og følge instruktionerne.

For at sikre fortsat sikker anvendelse bør risikovurderingen gentages regelmæssigt over tid.



Stabil siddestilling ved oprejsning

Sørg for, at brugeren kan sidde stabilt på sengekanten og have begge fødder solidt placeret på gulvet før oprejsning. Dette er nødvendigt for, at oprejsningsstøtten kan anvendes sikkert.



Sengekompatibilitet

Produktet skal anvendes på senge med en stabil ramme. Produktet må ikke anvendes på senge med meder, da disse kan glide eller vælte under belastning. I sådanne tilfælde skal mederne udskiftes med fire stabile sengeben før montering. Ved montering på en enkelseng (bredde ≤ 120 cm) skal sengen altid placeres med den ene langside op ad en væg.

Senge, hvor madrassen ikke har tilstrækkelig kantstabilitet og synker sammen ved belastning nær sengekanten, er ikke egnede til sikker anvendelse, da risikoen for klemning kan øges.



Anvendelse på justerbare senge

Let's Get Up må ikke monteres på højdejusterbare eller regulerbare senge og må ikke anvendes sammen med elektrisk regulerbart ryglæn. En undtagelse gælder kun, hvis sengen er låst i sin position og ikke kan ændres. I så fald skal det kontrolleres, at sengens indstillinger ikke utilsigtet kan ændres af brugeren, da der kan opstå risiko for klemning.



Anvendelse med sengeforhøjere

Ved brug på senge med sengeforhøjere skal disse være korrekt monteret og sikkert fastgjort omkring sengens ben. Sørg for, at sengen står stabilt og ikke risikerer at bevæge sig, inden oprejsningsstøtten tages i brug.

Tekniske data:

Testet i henhold til ISO 60601-2-52:2009

For en maksimal brugervægt på 150 kg.


Håndtagshøjde 81 - 97 cm.

Sengebeslagets højde 9 - 45 cm.

Bundpladens længde 59 cm.


Bundpladens bredde 35 cm.

Vægt 11.5 kg.

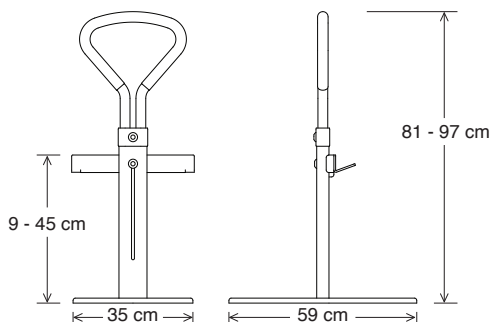

MATERIAL

1. Handle - Foam rubber
2. Handle tube - Aluminium
3. Height adjustment cover - Plastic
4. Bed bracket - Steel
5. Floor plate - Steel

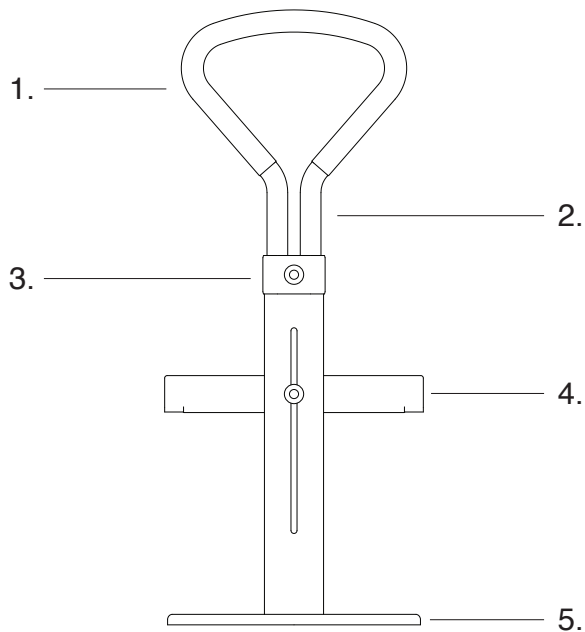

Återvinning / Recycling

Denna produkt skall återvinnas i enlighet med nationella riktlinjer.
This product must be recycled in accordance with national guidelines.





www.trustcare.se

Trust Care AB
Skrittgatan 8 b, 213 77 Malmö
+46 40 15 61 20
info@trustcare.se
www.trustcare.se

2026-09_v7