



# slidex

simply smile

NY

## SlideX®

Det supplerende hjælpemiddel til professionelle brugere til på- og aftagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser. Til brug i kombination med Easy-Slide, Sim-Slide og Magnide.



### Problemstilling

For patienter og plejere er det daglige ritual omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper og strømpebukser en slidsom og møjsommelig proces, hvor risikoen for belastnings- og arbejdsskader er høj for plejepersonalet. Det samme gør sig gældende for de patienter, der selv er i stand til at udføre opgaven. Den fysiske belastning, som på- og aftagningen medfører, kan virke som en uoverskuelig opgave, hvilket kan få en direkte betydning for, om behandlingen gennemføres med succes af patienten.

### Løsning

SlideX er designet til yderligere at formindske de problemer der er forbundet med på- og aftagning af kompressionsstrømper og strømpebukser. SlideX kan bruges til kompressionsstrømper med åben og lukket tå og bruges sammen med en Easy-Slide, Sim-Slide eller Magnide.

SlideX er fremstillet af et meget glat materiale, som er behandlet med en særlig belægning. Dette sikrer et ultra glat slutprodukt, som nedsætter friktionen væsentligt ved på- og aftagning af kompressionsstrømper. Den meget høje reduktion af friktion, der opnås som følge heraf, sikrer at den fysiske belastning holdes på et minimum for både plejere og patienter.

### Målgruppe

SlideX giver en effektiv løsning til plejere der hjælper patienterne med at på- og aftage kompressionsstrømper og strømpebukser. Takket være SlideX kan kompressionsstrømper og strømpebukser nu sættes på og tages af med endnu mindre fysisk belastning.

# SlideX®

Løsningen til minimering af fysisk belastning for alle plejere

## Produktfordele

- Kan bruges med alle Slide Solution produkter
- Topkvalitet - fremragende design
- Reducerer den fysiske anstrengelse for både plejepersonale og brugere af kompressionsstrømper
- Øger patientens uafhængighed og komplians
- Kompressionsstrømperne bevarer deres kompressionsegenskaber længere
- Let at bruge
- Sparer tid og penge
- Lang holdbarhed
- Nem at tage med overalt

## Sortiment

Vare nummer	Størrelse
E01520	Medium
E01521	Large




Placér Easy-Slide, Sim-Slide eller Magnide hen over fod'en.




Klik magneterne sammen på SlideX og placér SlideX på langt foran på benet:


- den lange side er under (på over- og underbenet), den korte side er over;
- vend den nederste kant rundt om anklen således at SlideX falder ind i Easy-Slide, Sim-Slide eller Magnide;
- stroppen ligger oven på patientens knæ

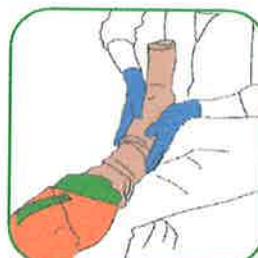

Skub strømpen over Easy-Slide, Sim-Slide eller Magnide på normal vis indtil strømpens hæl sidder i den rigtige position

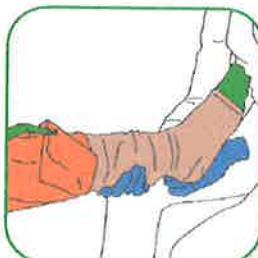

Skub strømpen i en jævn bevægelse fra Easy-Slide, Sim-Slide eller Magnide over SlideX længere op mod knæet indtil ca. 2 cm under knæskallen.

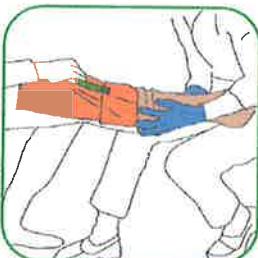

Patienten kan hjælpe, så snart kanten af den elastiske strømpe er på SlideX, ved at trække i stroppen, mens plejeren fortsætter med at skubbe strømpen hen over benet.